

# Guide Utilisateur - Praticien

---

## Optiskin - Manuel d'utilisation pour les Praticiens

---

### Table des matières

1. [Connexion et sélection de cabine](#)
  2. [File d'attente](#)
  3. [Assistant de séance \(3 étapes\)](#)
  4. [Séance active](#)
  5. [Workflow quotidien](#)
- 

## 1. Connexion et sélection de cabine

### Se connecter

1. Ouvrez votre navigateur web
2. Accédez à l'adresse de l'application Optiskin
3. Entrez vos identifiants :
4. **Email** : votre adresse email professionnelle
5. **Mot de passe** : votre mot de passe

 Capture: Écran de connexion

1. Cliquez sur "**Se connecter**"

### Sélectionner votre cabine

Après connexion, vous pouvez choisir votre cabine de travail.

### Capture: Sélection cabine

1. La grille affiche toutes les cabines disponibles
2. Chaque cabine indique son statut :
3. **Disponible** (vert) : Vous pouvez la sélectionner
4. **Occupée** (gris + nom) : Un autre praticien l'utilise
5. **Votre cabine** (bordure bleue) : Cabine actuellement sélectionnée
6. Cliquez sur une cabine **disponible**
7. Vous êtes redirigé vers la file d'attente

## 2. File d'attente

La file d'attente affiche les patients prêts pour leur séance.

### Vue d'ensemble

#### Capture: File d'attente praticien

### Comprendre la file

Chaque carte patient affiche :

Information	Description
Nom	Nom et prénom du patient
Zones	Zones à traiter avec séances restantes
Attente	Temps écoulé depuis l'arrivée
Phototype	Type de peau (I à VI)

## Appeler un patient

1. Repérez le patient suivant dans la file
2. Cliquez sur le bouton "**Appeler**"

 Capture: Appeler patient

1. Vous êtes redirigé vers l'assistant de séance

## 3. Assistant de séance (3 étapes)

L'assistant de séance guide la préparation du traitement en **3 étapes**.

### Étape 1/3 : Sélectionner les zones

 Capture: Étape 1 - Zones

L'écran affiche toutes les zones du patient avec des séances restantes.

Pour chaque zone : - **Nom de la zone** - **Progression** : Séance X/Y (ex: 3/6) - **Barre de progression** visuelle - **Case à cocher** : Cliquez pour sélectionner

**Actions** : 1. Cliquez sur les cartes des zones à traiter 2. Les zones sélectionnées ont une bordure bleue 3. Cliquez sur "**Suivant**"

**Note** : Vous pouvez sélectionner plusieurs zones pour une séance multi-zones.

### Étape 2/3 : Paramètres laser

 Capture: Étape 2 - Paramètres

Pour chaque zone sélectionnée, configurez les paramètres laser.

## Type de laser

Deux boutons : **Alexandrite** ou **Yag**

## Taille du spot (mm)

Boutons de sélection : 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25

## Paramètres numériques

Champ	Unité	Description
Fluence	J/cm <sup>2</sup>	Énergie du laser
Pulse	ms	Durée d'impulsion
Freq	Hz	Fréquence

**Astuce** : Les paramètres de la dernière séance sont chargés automatiquement.

Cliquez sur "**Suivant**" pour continuer.

## Étape 3/3 : Confirmer la séance

 Capture: Étape 3 - Confirmation

L'écran de confirmation affiche :

**Résumé patient** : - Initiales dans un cercle coloré - Nom complet - Phototype (badge) - Code carte (badge)

**Résumé par zone** : - Nom de la zone - Numéro de séance (ex: 4/6) - Paramètres laser en badges : - Type laser (Alexandrite/Yag) - Spot (18mm) - Fluence (J/cm<sup>2</sup>) - Pulse (ms) - Fréquence (Hz)

**Action** :

Cliquez sur le gros bouton "**Démarrer la séance**" pour lancer le traitement.

## 4. Séance active

Après le démarrage, vous arrivez sur l'écran de séance active.

### Écran principal

 Capture: Séance active

L'écran affiche :

**En haut** : - Nom du patient - Badge de la zone en cours - Badge numéro de séance (ex: 4/6)

**Au centre** : - **Chronomètre géant** : Temps écoulé (MM:SS ou H:MM:SS) - Indicateur "**EN PAUSE**" si en pause

**Sous le chronomètre** : - Badges des paramètres laser configurés

**Bouton rond** : - **Pause** (icône pause) : Met le chronomètre en pause - **Play** (icône lecture) : Reprend le chronomètre

### Tiroir d'actions (drawer)

En bas de l'écran, un tiroir coulissant permet d'accéder aux actions.

 Capture: Tiroir actions

**Tirez vers le haut** pour ouvrir le tiroir.

### Boutons d'action rapide

Bouton	Action
Photo	Prendre une photo avec l'appareil
Effet	Signaler un effet secondaire
Note	Ajouter une note

## Formulaire effet secondaire

 Capture: Effet secondaire

1. Cliquez sur "**Effet**"
2. Saisissez la description
3. Sélectionnez la sévérité :
4. **Léger** : Réaction normale
5. **Modéré** : Réaction plus importante
6. **Sévère** : Nécessite attention médicale
7. Cliquez sur "**Ajouter**"

## Formulaire note

1. Cliquez sur "**Note**"
2. Saisissez votre observation
3. Cliquez sur "**Ajouter**"

## Photos capturées

Les photos prises s'affichent en miniature. Cliquez sur la corbeille pour supprimer.

## Effets enregistrés

Liste des effets secondaires avec leur sévérité (badge coloré).

## Terminer la séance

1. Ouvrez le tiroir
2. Cliquez sur "**Terminer la séance**"

 Capture: Confirmation fin

1. Un dialogue de confirmation apparaît
2. Cliquez sur "**Confirmer**"

## Séance multi-zones :

Si plusieurs zones ont été sélectionnées, après la première zone : - Un toast affiche "Zone suivante: [nom]" - Le chronomètre repart à zéro - Répétez pour chaque zone

Après la dernière zone : - Toast "Séance terminée et sauvegardée" - Retour automatique à la file d'attente

---

## 5. Workflow quotidien

### Début de journée

Connexion


↓

Sélection de cabine (optionnel)

↓

File d'attente

## Boucle de traitement

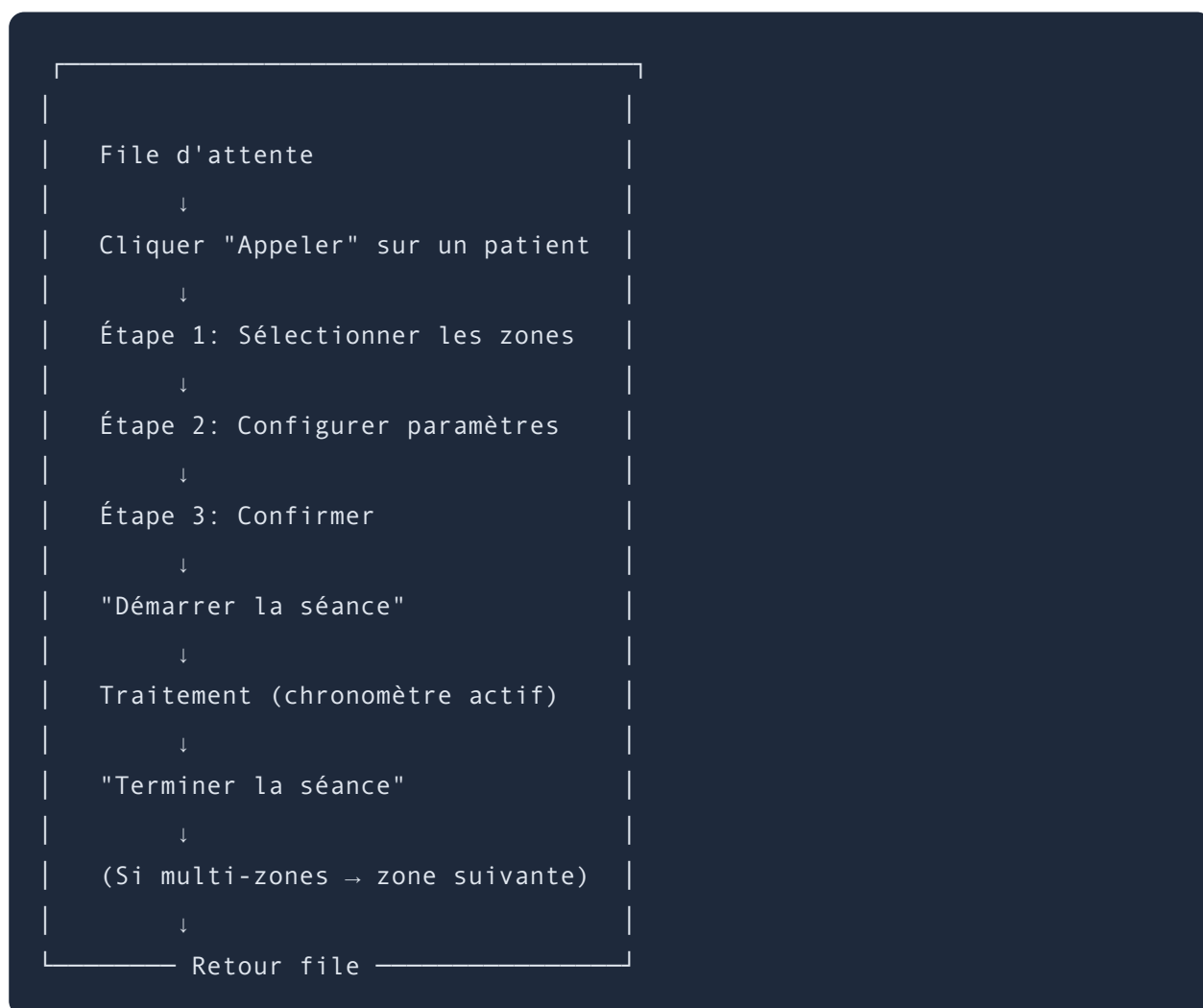

## Pendant la séance

1. **Surveiller** le chronomètre
2. **Mettre en pause** si interruption
3. **Photographier** si nécessaire (avant/après, réaction)
4. **Noter** tout effet secondaire immédiatement
5. **Ajouter** des observations textuelles

## Actions disponibles pendant la séance

Action	Quand l'utiliser
Photo	Documenter l'état avant/après, réaction cutanée
Effet	Toute réaction anormale (rougeur excessive, douleur)



Action	Quand l'utiliser
Note	Observations générales, ajustements effectués
Pause	Interruption temporaire (question patient, incident)

## Paramètres laser recommandés

### Par phototype

Phototype	Type laser	Fluence recommandée
I-II	Alexandrite	Standard
III-IV	Alexandrite/Yag	Modérée
V-VI	Yag	Réduite

**Note** : Adaptez toujours selon l'historique du patient et les réactions précédentes.

## Situations particulières

### Patient non trouvé

Si "Patient introuvable" s'affiche : 1. Cliquez sur "**Retour**" 2. Vérifiez avec l'accueil

### Aucune zone avec séances restantes

Si le message "Aucune zone avec des séances restantes" s'affiche : - Le patient a terminé toutes ses séances - Retournez à la file d'attente

### Problème technique

1. Ne fermez pas l'onglet (la séance est en mémoire locale)
2. Actualisez la page si bloqué

3. Contactez l'administrateur

---

## Support

En cas de problème technique : 1. Vérifiez votre connexion internet 2. Actualisez la page 3. Contactez l'administrateur

---

*Documentation Optiskin v2.2.0 - Février 2026 Basée sur le code source frontend-v2*